

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

UNICTECH EYE MASK 5.0

SLEEP BETTER · LOOK YOUNGER · FEEL ENERGIZED

DAY & NIGHT EYE WELLNESS TECHNOLOGY



TESTADO OFTALMOLÓGICAMENTE


RITUAL INTELIGENTE PARA EL BIENESTAR
Y LA LONGEVIDAD DE LA MIRADA



LUZ LED
VERDE



LUZ LED
ROJA

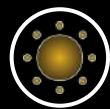

LUZ
NIR



MICROCORRIENTES
EMS

REDUCE
LAS BOLSAS

MINIMIZA
LAS OJERAS

SUAVIZA
LAS ARRUGAS

ILUMINA
LA MIRADA

FAVORECE EL
DESCANSO REPARADOR

FICHA TÉCNICA

1 DISPOSITIVO, 3 TECNOLOGÍAS, 2 MODOS, 6 BENEFICIOS

UNICTECH EYE MASK 5.0 representa una nueva generación de cuidado inteligente para el contorno de ojos. Su tecnología combina **luz LED roja, luz LED verde, NIR y microcorrientes EMS** en un dispositivo inalámbrico y fácil de usar, **diseñado para integrarse en tu rutina diaria de bienestar y longevidad.**

Por la mañana, ayuda a despertar la mirada, reducir la apariencia de bolsas, ojeras y tono irregular. Por la noche, ayuda a suavizar arrugas y líneas de expresión, relajar la mirada y favorecer un ritual de descanso reparador.

BENEFICIOS PRINCIPALES



REDUCE
LAS BOLSAS



ILUMINA
LA MIRADA



FAVORECE EL
DESCANSO REPARADOR



MINIMIZA
LAS OJERAS



SUAVIZA
LAS ARRUGAS



CORRIGE
EL TONO IRREGULAR

LA CIENCIA DETRÁS DE UNA MIRADA MÁS JOVEN

Este dispositivo combina luz LED dual roja y verde, luz NIR y microcorrientes EMS para **cuidar el contorno de ojos de forma inteligente según el momento del día.**

Cada tecnología actúa de forma complementaria para ayudar a tratar los principales signos visibles de fatiga y envejecimiento de la mirada: bolsas, ojeras, arrugas, líneas de expresión, tono irregular y falta de luminosidad.

Cada tecnología tiene una función específica:

LUZ LED VERDE (520nm)

La luz LED verde actúa principalmente en las **capas superficiales de la piel**, donde se concentran los **melanocitos** y las **alteraciones visibles del tono**. Esta longitud de onda se utiliza en fotobiomodulación estética por su afinidad con los procesos relacionados con la pigmentación, **ayudando a modular la apariencia de las zonas oscuras, manchas visibles y tono irregular**. Al incidir sobre el contorno de ojos, contribuye a que la piel refleje la luz de forma más uniforme, suavizando visualmente la apariencia de ojeras pigmentarias, zonas apagadas y signos de cansancio. Por eso forma parte del Modo Día, cuando la mirada necesita verse más despierta, clara y luminosa.

LUZ LED ROJA (650nm)

La luz LED roja es una de las longitudes de onda más utilizadas en rejuvenecimiento cutáneo no invasivo por su capacidad para actuar en profundidad y estimular procesos celulares asociados a la firmeza, la elasticidad y la reparación visible. Su energía lumínica es absorbida a nivel mitocondrial, donde **ayuda a optimizar la energía celular y favorece la actividad natural de los fibroblastos, responsables de producir colágeno y elastina**. En el contorno de ojos, contribuye a **mejorar visiblemente arrugas, líneas de expresión, pérdida de firmeza y aspecto fatigado**. Además, la exposición nocturna a luz roja se ha asociado con mayores niveles de melatonina y una **mejora de la calidad del sueño**, por lo que el Modo Noche actúa

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION


como un ritual antiedad y wellness que repara la mirada mientras favorece un descanso más profundo y reparador.

LUZ INFRARROJA CERCANA (850nm)

La luz NIR es una luz **no visible capaz de penetrar más profundamente** que la luz LED visible. Mientras la luz LED trabaja principalmente en epidermis y dermis, el **NIR puede alcanzar capas más internas de la piel, donde ayuda a activar procesos vinculados a la oxigenación, la microcirculación y la recuperación tisular**. En el contorno de ojos, esta acción contribuye a revitalizar la zona, **mejorar el aspecto de fatiga y reforzar la eficacia del tratamiento**, tanto en el Modo Día como en el Modo Noche.

⚡ MICROCORRIENTES EMS

Las microcorrientes EMS emiten **impulsos eléctricos de baja intensidad que imitan las corrientes bioeléctricas naturales del cuerpo**. A nivel cosmético, esta estimulación ayuda a activar suavemente la musculatura superficial y los tejidos del contorno de ojos, **favoreciendo el tono, la firmeza y la apariencia de una piel más tersa**. Al mejorar la estimulación local y acompañar el movimiento natural de drenaje, las microcorrientes contribuyen a **reducir visualmente la hinchazón y las bolsas**, especialmente cuando se combinan con un producto conductor como UNICEYES TRIPLE ACTION. En sinergia con la luz LED y NIR, ayuda a revelar una mirada más firme, descansada y visiblemente rejuvenecida.

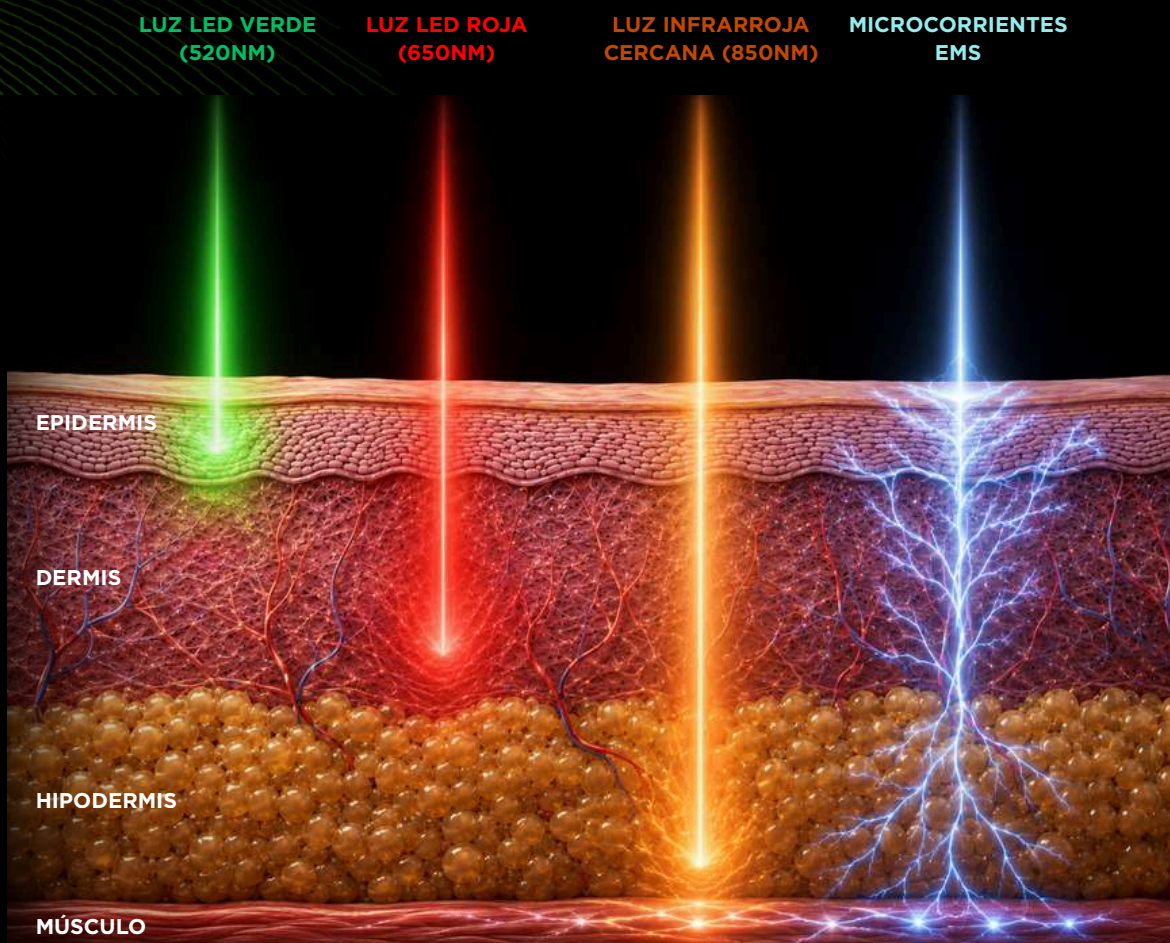

NUEVO PACKAGING PREMIUM

Hemos renovado el packaging de UNICTECH EYE MASK 5.0 con una imagen más premium, tecnológica e innovadora, alineada con el posicionamiento de la nueva generación del dispositivo. El nuevo diseño refuerza la percepción de lujo, mejora el impacto visual en punto de venta y eleva la experiencia de unboxing.

MÁS PREMIUM. MÁS TECNOLÓGICO. MÁS UNICSKIN.



PACKAGING ANTERIOR

NUEVO PACKAGING



DISEÑO PREMIUM

Nueva estética más sofisticada y alineada con el universo UNICSKIN.



MAYOR IMPACTO VISUAL

Packaging más tecnológico, reconocible y competitivo en PDV.



EXPERIENCIA DE UNBOXING ELEVADA

Presentación más cuidada, con una percepción de valor superior.



ESQUEMA DE USO UNICTECH EYE MASK 5.0

DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO

Se adapta perfectamente a la forma del rostro y del contorno de los ojos, para poder utilizarlo mientras realizas otras tareas.

TECNOLOGÍA DE MICROCORRIENTES (EMS)

Las microcorrientes simulan las corrientes eléctricas del cuerpo a nivel celular para tonificar, reafirmar y reducir las arrugas del contorno de los ojos.



PUERTO DE CARGA USB

Con una sola carga alcanza para 10 usos.

TECNOLOGÍA DE LUZ LED VERDE + ROJA + NIR

Combina luz verde, roja e infrarroja cercana para actuar en distintas capas del contorno de ojos: ilumina, mejora el tono irregular, suaviza arrugas y revitaliza la mirada.

MODO DÍA ☀️

Mantén pulsado el botón durante 1 segundo para encender el Modo Día.

MODO NOCHE 🌙

Mantén pulsado el botón durante 1 segundo para encender el Modo Noche.

Gracias a su **diseño ergonómico**, UNICTECH EYE MASK 5.0 dirige la acción de la luz LED/NIR y de las microcorrientes EMS hacia el contorno periorcular, especialmente en la zona inferior y lateral de la mirada. Su forma favorece una acción ascendente desde ambos laterales del rostro hacia la zona de las patas de gallo, evitando concentrar la estimulación directamente sobre el párpado móvil. Así, **el tratamiento actúa sobre las áreas donde se hacen más visibles bolsas, arrugas, líneas de expresión y signos de fatiga**, respetando la delicadeza de la zona ocular.

MODO DE USO UNICTECH EYE MASK 5.0




PASO 1

Antes de la primera sesión, carga completamente el dispositivo utilizando exclusivamente el cable incluido. El dispositivo estará completamente cargado cuando los indicadores luminosos permanezcan fijos en color verde.



PASO 2

Con la piel limpia, aplica una capa uniforme de UNICEYES TRIPLE ACTION o gel conductor a base de agua en el contorno de los ojos. La piel debe permanecer ligeramente húmeda para la correcta conducción de las microcorrientes EMS.

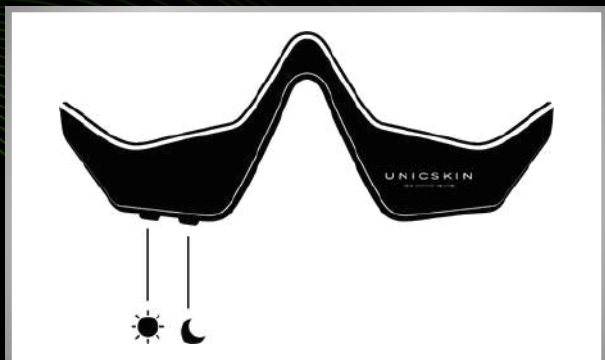

PASO 3

Coloca el dispositivo sobre el contorno de los ojos y enciéndelo manteniendo pulsado durante 1 segundo el botón de Modo Día o Modo Noche.



PASO 4

Deja actuar durante 10 minutos mientras realizas otras tareas. El dispositivo se apagará automáticamente al finalizar la sesión.

Para obtener **resultados óptimos**, recomendamos utilizar UNICTECH EYE MASK 5.0 durante **10 minutos por sesión**, un mínimo de **3 veces por semana** durante **4 semanas**. El tratamiento puede realizarse en **Modo Día o Modo Noche**, según tu rutina, e incluso incorporarse a diario por la mañana y/o por la noche si la piel lo tolera correctamente.

Los resultados pueden empezar a percibirse desde la primera sesión, aunque el protocolo de 12 sesiones permite conseguir una mejora visible y progresiva del contorno de ojos. **Para mantener los resultados, recomendamos continuar el tratamiento 1 o 2 veces por semana.**

COMPLETA TU RUTINA



UNICEYES TRIPLE ACTION

Contorno experto antiarrugas, anti-bolsas y antiojeras. Hidrata, descongestiona e ilumina, actuando como conductor imprescindible para las microcorrientes EMS.



UNICCOLLAGEN FLASH EYE MASK

Parches de colágeno vegano efecto flash para hidratar, refrescar y revitalizar el contorno de ojos, aportando una mirada más descansada, luminosa y rejuvenecida al instante.

CARGA

Tu dispositivo UNICTECH EYE MASK 5.0 incluye su cable para ser recargado por USB. Una carga de 1h bastará para recargarlo completamente y proveer hasta 10 tratamientos de 10 minutos.

Mientras lo recargues, las luces indicadoras parpadearán en color rojo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, las tres luces permanecerán encendidas y en color verde.

CÓMO CUIDAR EL DISPOSITIVO

Después de cada uso, limpia suavemente la superficie de UNICTECH EYE MASK 5.0, especialmente las zonas que han estado en contacto con la piel. Utiliza un paño suave ligeramente humedecido o una toallita limpiadora a base de agua, sin alcohol ni perfume. Retira cualquier resto de producto conductor y deja secar completamente el dispositivo antes de guardarlo.

Guarda siempre el dispositivo en su funda rígida para protegerlo del polvo, los roces y posibles deformaciones, y conservarlo en óptimas condiciones entre usos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	139.6 x 53.5 x 37mm
Peso	42g
Voltios	3.7V
Frecuencia	0.5W
Voltios de carga	5V
Corriente de carga	120mA
Máx. Corriente de funcionamiento	120mA
Frecuencia EMS	modo continuo 1KHZ



PRECAUCIONES

- Es normal percibir una ligera sensación de estimulación durante el uso, asociada a las microcorrientes EMS. No utilices el dispositivo si la sensación resulta dolorosa, incómoda o irritante.
- El dispositivo no es resistente al agua. No sumergir, lavar bajo el grifo ni mojar el puerto de carga.
- No desmontar, manipular ni intentar reparar el dispositivo.
- No recomendado durante el embarazo o la lactancia.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Guardar en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la humedad y del calor directo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas veces por semana debo utilizarlo?

Para obtener resultados óptimos, recomendamos utilizar UNICTECH EYE MASK 5.0 durante 10 minutos por sesión, un mínimo de 3 veces por semana durante 4 semanas. Este protocolo de 12 sesiones permite trabajar el contorno de ojos de forma progresiva y visible. Después, puedes mantener los resultados con 1 o 2 sesiones semanales.

¿Puedo usarlo todos los días?

Sí. UNICTECH EYE MASK 5.0 combina luz LED/NIR no invasiva y microcorrientes EMS de baja intensidad, diseñadas para un uso cosmético seguro y confortable. Puedes incorporarlo a tu rutina diaria, por la mañana y/o por la noche, siempre que la piel lo tolere bien. Aun así, usarlo más veces o durante más tiempo no significa obtener mejores resultados: la clave está en la constancia, en respetar los 10 minutos por sesión y en seguir el protocolo recomendado.

¿Puedo usarlo durante más de 10 minutos?

No es necesario. Cada sesión está diseñada para durar 10 minutos, el tiempo óptimo para que la luz LED/NIR y las microcorrientes EMS actúen correctamente sobre el contorno de ojos. Prolongar el uso no implica mejores resultados.

¿Puedo usarlo sin UNICEYES TRIPLE ACTION o gel conductor?

No. Para que las microcorrientes EMS se transmitan correctamente, la piel debe estar ligeramente húmeda y en contacto con un producto conductor. UNICEYES TRIPLE ACTION es el complemento ideal porque, además de facilitar la conducción de las microcorrientes, trata el contorno con una acción antiarrugas, antibolsas y antiojeras, ayudando a hidratar, iluminar y mejorar visiblemente la mirada.

¿Es normal sentir pequeñas corrientes durante el uso?

Sí. Es normal percibir una ligera sensación de estimulación asociada a las microcorrientes EMS. La sensación debe ser cómoda y nunca dolorosa. Si resulta molesta, retira el dispositivo y asegúrate de que la piel tiene suficiente producto conductor.

¿Puedo alternar el Modo Día y el Modo Noche?

Sí. Puedes elegir el modo según el momento del día y las necesidades de tu mirada. El Modo Día ayuda a despertar, iluminar y revitalizar el contorno; el Modo Noche está orientado a suavizar arrugas, favorecer la reparación visible y acompañar el descanso.

UNISKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION



EXPERTOS GLOBALES EN TECNOBELLEZA & BELLEZA EN EL HOGAR

RESULTADOS EFICACES PROBADOS POR LA CIENCIA

SOSTENIBILIDAD & FÓRMULAS +92% DE ORIGEN NATURAL

LUJO INNOVADOR A TU ALCANCE
