

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION



UNICBLUE

UNICBLACK

UNICGREEN

UNICPINK

UNICTHERMO-SONIC 2.0

FUN COLLECTION

CEPILLO FACIAL MULTIACCIÓN

EL DISPOSITIVO DE BELLEZA ANTIEDAD MÁS VERSÁTIL

PARA TODOS. EN CUALQUIER LUGAR. EN CUALQUIER MOMENTO

UNICDEEP
CLEANSE

UNICFACE
YOGA

UNICEYES
& LIPS

UNICKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

1 DISPOSITIVO. DOBLE TECNOLOGÍA. TRIPLE ACCIÓN



TECNOLOGÍA DE CALOR

Tratamiento de calor a 42°C para reducir los signos de la edad y conseguir una piel visiblemente más joven.

TECNOLOGÍA SÓNICA

10.000 pulsaciones por minuto para un potente drenaje linfático que descongestiona y aporta un aspecto más radiante a la piel.

TECNOLOGÍA QUE **MULTIPLICA x3**
LA EFICACIA DE UNA DERMOCOSMÉTICA ACTIVA

APROBADO POR EXPERTOS COMO PRODUCTO SEGURO Y EFICAZ
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

UNICSKIN


YOUR EFFECTIVE SOLUTION



1
UNICDEEP
CLEANSE



2
UNICFACE
YOGA

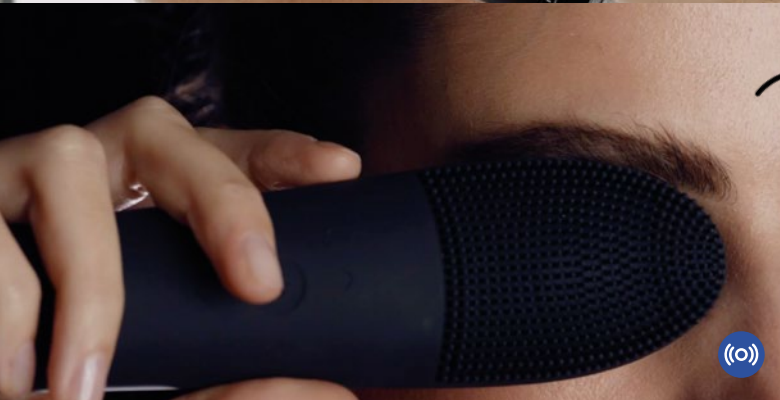

3
UNICEYES
& LIPS



1 DISPOSITIVO. DOBLE TECNOLOGÍA. TRIPLE ACCIÓN

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

1 DISPOSITIVO. DOBLE TECNOLOGÍA. TRIPLE ACCIÓN



UNICDEEP
CLEANSE

Limpia en profundidad, desmaquilla y elimina bacterias

 **Tecnología de Calor antiedad a 42°C + Tecnología Sónica a 10.000 pulsaciones p.m.**

Mediante una suave exfoliación, apta para todo tipo de pieles (incluso las más sensibles), minimiza los poros y elimina las bacterias causantes del acné.




UNICFACE
YOGA

Tratamiento antiedad (UNICFACE YOGA)

 **Tecnología de Calor antiedad a 42°C + Tecnología Sónica a 10.000 pulsaciones p.m.**

Mejora notablemente la elasticidad de la piel y minimiza las arrugas, dejando la piel más lisa, suave y aterciopelada.

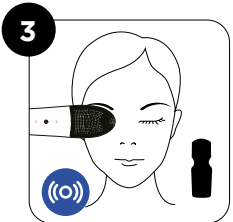

UNICEYES
& LIPS

Tratamiento para el contorno de ojos y labios

 **Tecnología Sónica Intermitente (Drenaje Linfático)**

Tratamiento de ojeras, bolsas y arrugas mediante un potente drenaje linfático. Tratamiento del contorno de labios suavizando arrugas y líneas alrededor de la boca. Un masaje con Tecnología que optimiza los resultados de un masaje manual.

¡TU MEJOR ALIADO PARA UNA PIEL JOVEN Y RADIANTE!

MODO DE USO

1 UNICDEEP CLEANSE


LIMPIA EN PROFUNDIDAD, DESMAQUILLA Y ELIMINA BACTERIAS (100% Waterproof)

 **Tecnología de Calor antiedad a 42°C + Tecnología Sónica a 10.000 pulsaciones por minuto.**

Se recomienda aplicar el cepillo junto al producto: UNICDETOX&GO Espuma innovadora All-in-One de UNICSKIN.




Humedece tu cara

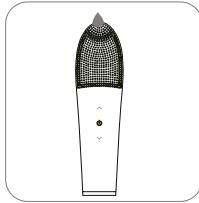


Aplica la espuma sobre la cabeza del cepillo



Enciende la Tecnología de Calor y Sónica pulsando una sola vez

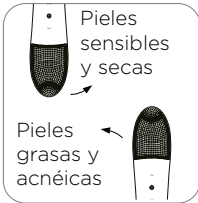

Elige la mejor opción para tu piel

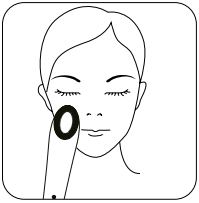



Limpia el rostro con movimientos circulares



Llega a las zonas más difíciles



 30 SEG.

 **EFICACIA PROBADA: +93%** de los voluntarios vieron sus **poros más limpios y su piel más luminosa**



UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

2 UNICFACE YOGA

TRATAMIENTO DE CALOR ANTIEDAD PARA PIELS MADURAS

 **Tecnología de Calor antiedad a 42°C + Tecnología Sónica a 10.000 pulsaciones por minuto.**

Se recomienda aplicar el cepillo junto al producto: UNICSerums (UNICHYDRO-ACTIVE, UNICLIFTING+, UNICLUMINOSITY 3.0 y UNICWRINKLE-STOP) de UNICSKIN.



Aplica el sérum en tu rostro...



... Con movimientos ascendentes




Trabaja la zona de la frente



Enciende la Tecnología de Calor y Sónica pulsando una sola vez



Masajea suavemente con la cara trasera del producto

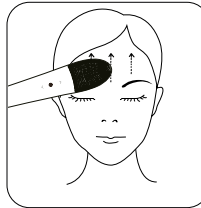

Y relaja los músculos



 3 MIN.

“BIKRAM YOGA” PARA TU ROSTRO: masaje de yoga facial con **Tecnología de Calor a 42º** equivalente a un tratamiento antiedad en spa en solo 3 minutos



UNICFACE YOGA

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GIMNASIA FACIAL

La **Tecnología de Calor a 42°C** del cepillo **UNICHERMO-SONIC 2.0** traslada un **tratamiento antiedad de Spa a tu hogar, en tan sólo 3 minutos**. Los ejercicios únicos **UNICFACE YOGA** de UNICSKIN **multiplican los efectos de la gimnasia facial con los dedos**, logrando **resultados inmediatos**.

Protocolo UNICSKIN: Practica cada día **5 ejercicios de gimnasia facial** que te ayudarán a tonificar tu rostro, mantenerlo tenso, jugoso y con los que evitarás la flacidez de la piel. Incluye esta rutina junto a la tabla de abdominales o la serie de sentadillas.



UNICFACE YOGA LABIOS

Aplica la cara trasera del cepillo mediante movimientos circulares alrededor de los labios con el modo 1 (Tecnología de Calor y Tecnología Sónica) junto con el sérum adecuado para tu tipo de piel. A la vez, recorre con la lengua la parte interior de los labios en la misma dirección 3 veces, y repítelo en la dirección opuesta. Traga. **Esto ayuda a suavizar los pliegues nasolabiales y las líneas finas alrededor de la boca, levantando y fortaleciendo los músculos.**




UNICFACE YOGA ROSTRO JOVEN Y RADIANTE

Aprieta suavemente mediante toquecitos durante 2" y arrastrando hacia arriba la cara trasera del cepillo en modo 1 (Tecnología de Calor y Tecnología Sónica) junto con el sérum adecuado para tu piel, las mejillas y toda la cara, incluyendo el surco nasolabial, durante 60". **Este ejercicio mejora la circulación y estimula la producción de agentes para dar volumen. Es una técnica perfecta para que la piel brille por las mañanas.**



UNICFACE YOGA LIFTING DE OJOS

Aprieta suavemente la cara trasera del cepillo en modo 1 (Tecnología de Calor y Tecnología Sónica) en las puntas exteriores de una de las cejas. Abre los ojos ampliamente y estira las cejas con el cepillo. Mantén la posición durante 10" y repítelo 2 veces más. **Este ejercicio reduce las líneas entre las cejas, alivia la tensión y reafirma la piel de la frente. Con la Tecnología UNICSKIN, multiplicarás los efectos de un ejercicio de yoga facial con tus propios dedos.**

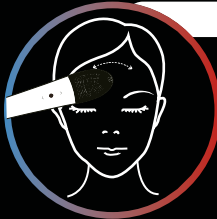

UNICFACE YOGA ARRUGAS FRENTE

Aprieta suavemente el cepillo por la cara trasera en el centro de la frente y deslízalo hacia los laterales de la frente durante 3" cada lado, en el modo 1 (Tecnología de Calor y Tecnología Sónica) junto con el sérum adecuado para tu tipo de piel. Repítelo 3 veces. **Esta técnica de masaje suave mejora la circulación, aumenta el colágeno y la elastina, y libera la tensión que puede causar arrugas profundas.**



UNICFACE YOGA ELEVACIÓN PÓMULOS

Apoya el cepillo por la cara trasera en el modo 1 (Tecnología de Calor y Tecnología Sónica) bajo el pómulo mientras presionas y levantas el músculo ligeramente. Mantén la elevación durante 5" y repite el gesto. Sigue el recorrido del hueso que sostiene las mejillas hasta que llegues a la sien. Repite el ejercicio con el pómulo opuesto.

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

3 UNICEYES & LIPS

TRATAMIENTO PARA EL CONTORNO DE OJOS Y LABIOS

(o) Tecnología Sónica Intermitente (Drenaje Linfático).


Se recomienda aplicar el cepillo junto al producto: **UNICEYES TRIPLE ACTION Contorno de Ojos y Labios + los parches de colágeno UNICCOLLAGEN FLASH EYE MASK o UNICCOLLAGEN VOLUME LIP MASK** de UNICSKIN.



Aplica el contorno de ojos y labios



Enciende la Tecnología Sónica Intermitente pulsando dos veces

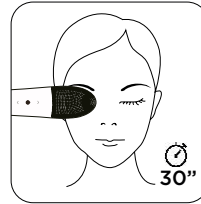

Mantén la cara trasera del cepillo sobre cada ojo



Masajea el contorno de los labios



Aplica los parches de colágeno en tus ojos



Aplica los parches de colágeno en tus labios



60 SEG.



Un masaje con Tecnología que optimiza los resultados de un masaje manual

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

UNICTHERMO-SONIC 2.0 FUN COLLECTION



**TECNOLOGÍA
SÓNICA
INTERMITENTE**



**TECNOLOGÍA DE
CALOR + SÓNICA (10.000
PULSACIONES)**



TRATAMIENTO
ANTIEDAD



TRATAMIENTO
DE OJOS



LIMPIEZA
PROFUNDA



PARA PIELES
SENSIBLES



SILICONA
MÉDICA



100%
WATERPROOF



DISEÑO
100% UNISEX



PORTÁTIL &
WIRELESS



FILAMENTOS
FINOS



FILAMENTOS
GRUESOS



RUTINA
AJUSTABLE



CERTIFICADOS
CE Y FDA



GARANTÍA
DE 2 AÑOS

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GIMNASIA FACIAL





TU DOSIS DIARIA DE DIVERSIÓN



¿PREPARADO PARA UNA NUEVA ERA DE CUIDADO FACIAL?

UNICKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

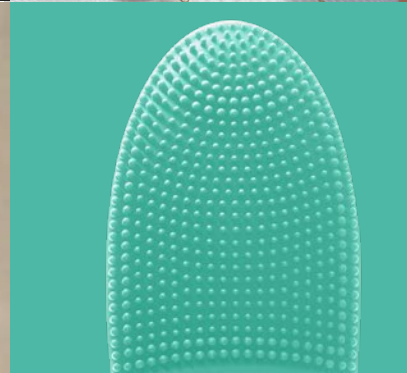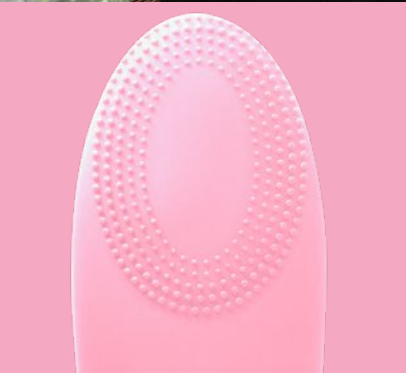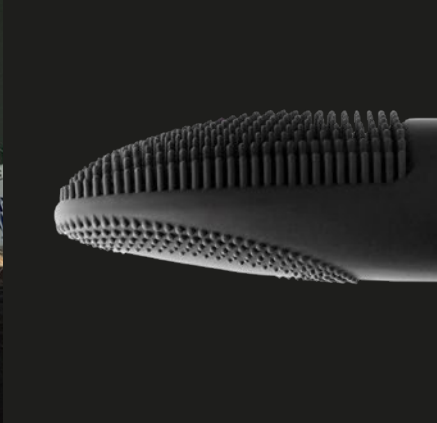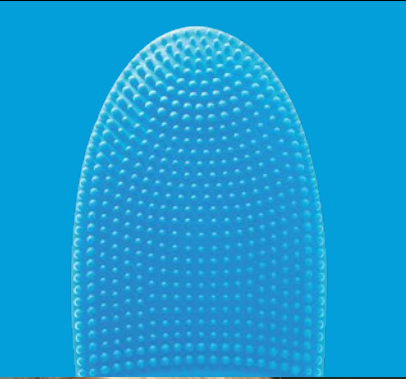

www.unicskin.com
customerservices@unicskin.com

#UNICKINERS

